


キッズサイズ

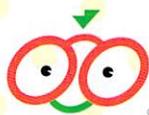

TOMATO GLASSES

トマトグラッシーズ

キッズ
A



ジュニアサイズよりちょっと小さめサイズ。

成長のいちじるしい時期にあわせた、うれしい細かいサイズ展開。

1歳～3歳のお子様向き

レンズサイズ **37** サイズ
47～51mm (目安)
約7.0g



3歳～6歳のお子様向き

レンズサイズ **43** サイズ
54～58mm (目安)
約8.0g



※重さはレンズを除いた
メガネ本体の重さです。
※対象年齢は目安です。

2歳～4歳のお子様向き

レンズサイズ **40** サイズ
50～54mm (目安)
約7.5g



5歳～8歳のお子様向き

レンズサイズ **45** サイズ
57～61mm (目安)
約8.5g



TKAC1
ブルー/クリアブルー (クルマ)



TKAC3
ブルー/ブルー (クルマ)



TKAC6
ブルー/ブルー (ヒコウキ)



TKAC7
クリア/ブラック



TKAC8
ブラック/イエロー





TKAC11
クリア/クリア (ハート)



TKAC13
ピンク/ピンク (ハート)



TKAC14
ピンク/クリアピンク (ハート)




TKAC18
ホワイト/ピンク (ベア)



TKAC19
ピンク/ピンク (フラワー)

※その他カラーございます。詳しくは取り扱い店にお問い合わせ下さい。

トマト
グラッシーズ
キッズAの
サイズ

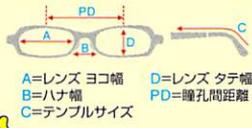

眼科さんからレンズタテ幅を指定されることがありますが、トマトグラッシーズは充分なタテ幅を確保しています。

| A□B-COD | F.PD |
|----------------------|---------|
| 37サイズ：37□14.0-125○28 | 51 |
| 40サイズ：40□14.5-125○29 | 54 |
| 43サイズ：43□15.0-125○30 | 58 |
| 45サイズ：45□16.0-125○31 | 61 (mm) |

トマトグラッシーズ キッズ交換パーツ (ジュニア共通)

こどもは想定外の行動をするもの。
壊しやすい箇所を部品で交換することで、買い替え不要で家計にもやさしいです。
また、色や柄を自由に組み合わせて、世界に1つだけのオリジナルも作れます。
フロントも各カラー・各デザインをご用意がございます。



2. 軽 さ

メガネ本体の総重量は
非常に軽量で、
メガネに慣れていない
お子様でも負担になりにくい
軽さです。

トマトグラスシリーズ

ジュニア……………8.5~9.5g

キッズ……………7.0~8.5g

ベビー……………6.3g



トマトグラスシリーズベビー

500円玉と
同じ重さ

※レンズを除いた
メガネ本体の重さです。

3. お子様一人ひとりにジャストフィット

トマトグラスシリーズには、お子様の一人ひとりの
顔面にピッタリ合ったメガネにするための機能がたくさん。

テンプル

長さが調整可能なネジ留め式。

お子様の耳までの長さに合わせてジャストの長さ
に調整することができます。

トマトグラスシリーズ ジュニア・キッズ…最大3cm伸縮

トマトグラスシリーズ ベビー……………最大2cm伸縮

※調節はメガネ屋さんにてご依頼下さい。

お子様の
顔の形に合わせて
調整できます



ノーズパッド


お子様の鼻の高さに合わせて調整可能。

変形があまり生じない特殊な樹脂と、肌にやさしい
シリコン製のノーズパッドには滑らずズレにくい溝
加工が施されています。

トマトグラスシリーズ ジュニア・キッズ…上下3段階

トマトグラスシリーズ ベビー……………上下5段階

※調節はメガネ屋さんにてご依頼下さい。

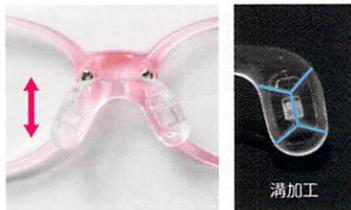

先セル

お子様の耳の形状に合わせて
ズレないようにしっかりホールド。

お子様の成長に合わせた緩やかなカーブ設計、装
着時耳の後ろにフィットする3Dデザインシェイブの
採用で、メガネのズレを抑制。メガネに慣れていな
いお子様でも違和感を少なくすることが出来ます。



4. バンド


必要に応じて、3D構造の専用メガネバンド（付属）を取り付けることができ、メガネをさらに安定的に掛けることができます。



トマトグラスシース専用バンドでフレームをより効果的にご使用していただけます。元気なお子様の動きでもしっかりホールドし安定させるため、様々な場面でご使用頂けます。特にレンズが重くなる場合（+5.00D以上の度数）に、バンドをすることで、前後の重さのバランスをとることができます。

| | |
|-------------------|------------|
| バンド長さ | |
| トマトグラスシースジュニア・キッズ | 13~24cm |
| トマトグラスシースベビー | 9.5~17.5cm |


装着の仕方 [取り扱い説明]

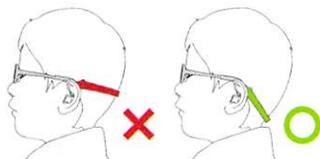

- ・耳掛けの部分にある取り付け穴にパチンと装着して下さい。
- ・強く締めつけず、髪の毛をおさえる程度で調節して下さい。
- ・バンドの位置は後頭部の下を通るようにして下さい。
- ・バンドの部品をむやみに強く引っ張らないで下さい。破損の原因となります。
- ・保護者の皆様による修理、改造は、安全上の問題が起こる可能性がございますのでおやめ下さい。

5. フレームの設計

こどもの頭部の特徴は、こめかみから後頭部にかけて広がりが大きく、目の間隔は狭くなっています。このような子どもたちの頭の形に合わせて設計しました。

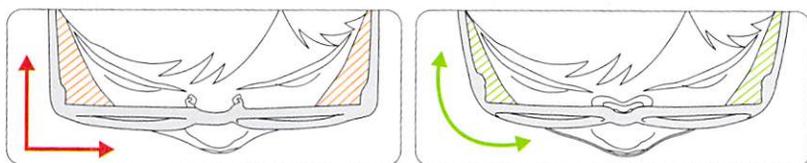

<一般メガネ>

<トマトグラスシース>

6. レンズの形状

視線の邪魔にならないレンズの形で、余分な空間がなく、大きい視野を確保しました。



<一般メガネ>

<トマトグラスシース>

✓ 顔に合ったサイズで、掛け心地がよい♪

気に入ったデザインの本がネが見つかったも、それがお子様の顔にぴったりと合わせられる大ききでなければ、快適に装用することはできません。

また、お子様は動きまわることが多いため、本がネがズれることが多いです。本がネがズれるとレンズの中心から視線がはずれ、正確な矯正ができなくなってしまうです。

サイズと掛け心地は、お子様の本がネ選びにおいて、大変重要です。

まず、お顔に合うサイズのズレにくい本がネを選び、それからデザインを選んでいくほうがよいでしょう。

サイズが合っていないと…

はずしたがる


窮屈

ズしおちる



正しい矯正ができない

サイズ選びのポイント

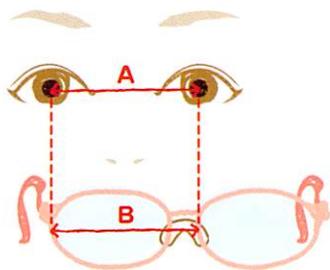


目の幅に合った大きさ

BがAの長さと同じか、+5mmまでがサイズ選びの目安です。

※A、Bの幅は眼科さん、本がネ屋さんで確認して下さい。

耳にしっかりかけることができる長さ

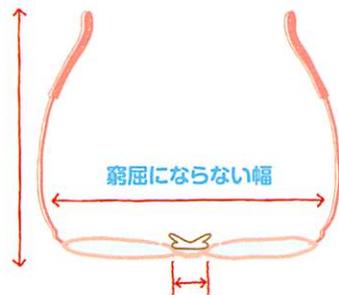

バランスよくかけられる鼻幅



本がネ屋さんにご相談いただきながら、お子様の顔に合ったサイズの本がネをお選び下さい。

トマトグラスィーズの特長

同じ悩みを持つ親御さんの想いと経験から開発されたこども用メガネ、それが「**トマトグラスィーズ**」です。
安全性、機能性、デザイン性など多くのこだわりが詰まったこども用メガネです。

1. 安心・安全な素材

耐衝撃性



乳幼児の哺乳瓶などに使われているものと同じ材料で製造されているため柔らかく衝撃に強いです。たとえ折れても鋭い破片が発生しません。

弾力性




メガネに瞬間的な強い力が加えられた場合にも弾力性が優れているので、すぐに元の形に戻せます。

材質の安全性

金属部分をほとんど使用せず安全。デリケートなお子様の肌にも安全な素材です。トマトグラスィーズの材質は、医療用カテーテルや哺乳瓶など、安全性が求められる商品に使用され、日本食品衛生法にも合格している素材です。(グリルアミドTR-90を100%使用)



(耐久性試験)

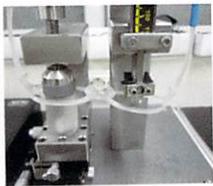

(変形試験)



(高温安定試験)

各国での試験に合格し、安全性が認められています。

